

H型セル ～VB9～ フランジガラスセル

■ セル構成

★ 16080 1/16" テフロンチューブ 2m

① テフロンチューブ (PTFE) 2m

★ B900 作用電極セルキャップ

※1 ② O-リング1 (バイトン) 1個

③ 電極ホルダー (PTFE) 2個 ※φ6電極適合

※1 ④ O-リング2 (バイトン) 2個 ※φ6電極適合

※1 ⑤ シリコン栓 (シリコン) 1個

⑥ セルキャップ1 (PTFE) 1個

※1 ⑦ O-リング3 (シリコン) 1個

★ B900 対極セルキャップ

③ 電極ホルダー (PTFE) 1個 ※φ6電極適合

※1 ④ O-リング2 (バイトン) 1個 ※φ6電極適合

※1 ⑦ O-リング3 (シリコン) 1個

⑧ セルキャップ2 (PTFE) 1個

★ B900 フランジガラスセル 2個

⑨ フランジガラスセル (パイレックスガラス) 2個

★ B900 ガasket 2枚 ※隔膜・ガラスフィルタ使用時に必要

⑩ ガasket 1 (バイトン) 2枚

■ 交換用パーツ

(※1) B900 セルキャップ用 ゴム 3回分

★ B900 フランジ固定用 クランプ

⑬ ガasket付き固定用クランプ1 (PEEK, バイトン) 1個

⑭ 六角ボルト (SUS304) 4個

⑮ ガasket付き固定用クランプ2 (PEEK, バイトン) 1個

⑯ ローレットナット (SUS304) 4個

★ B900 フランジガラスセル用 固定台

⑰ セル固定台 (SUS304, ゴム足) 1個

★ B900 ガラスフィルタ



⑪ ガラスフィルタ (G4, 孔径: 5~10 μm) 1個

★ B900 ガラスフィルタ用 ガasket ※ガラスフィルタ使用時に必要

⑫ ガasket 2 (バイトン) 1個

ガラスフィルタ使用時は
⑩⑪⑫を使用

隔膜使用時は⑩のみ使用

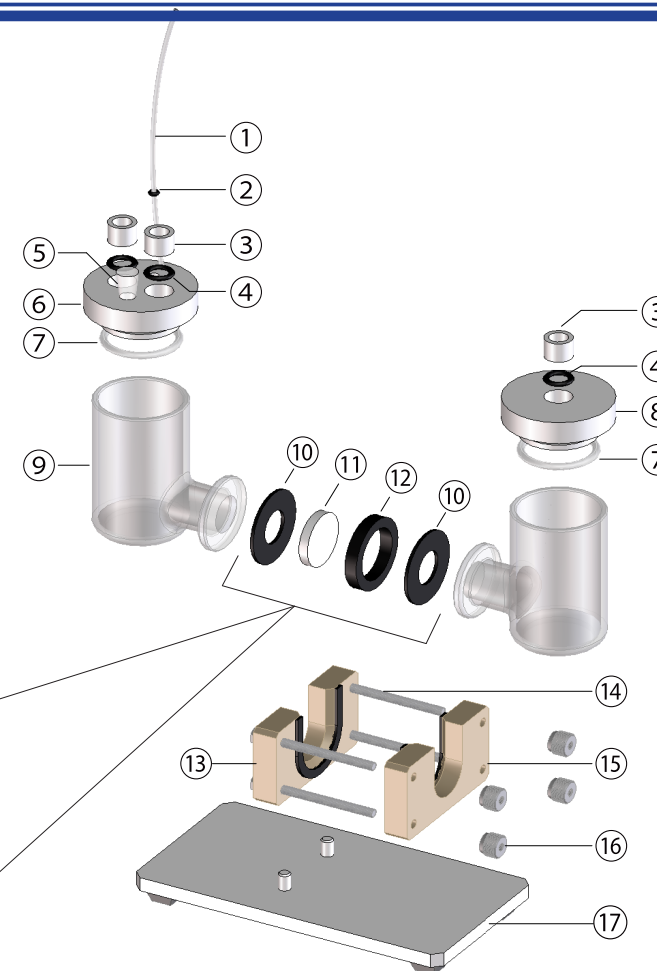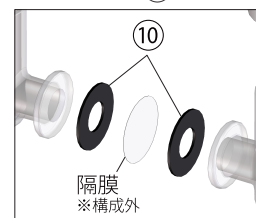

スターターキットには★マークが含まれております

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL) 0774-39-8299 (FAX) 0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>

